

「コアリング」にご注意


注射針を生理食塩液や薬剤のゴム栓に刺すとき、最も注意しなければいけないことがあります。それが、**コアリング**です。

コアリングとは

注射針を、生理食塩液の容器やエポプロステノール静注用「ヤンセン」のビンのゴム栓に刺すとき、注射針のあごの部分によってゴム栓からゴム片(コア)が削り取られ、薬液に混入したり、吸引不良の原因になることがあります。この現象をコアリングといいます。


コアリングは、注射針をゴム栓に対して斜めに刺したり、針を回転させながら刺したり、同じ場所に何回も刺したりすると起こりやすくなります。薬液の調整時には、コアリングにも十分な注意を払いましょう。

コアリングが発生した場合、その薬剤は使用せず、主治医あるいはかかりつけ薬局にご相談ください。

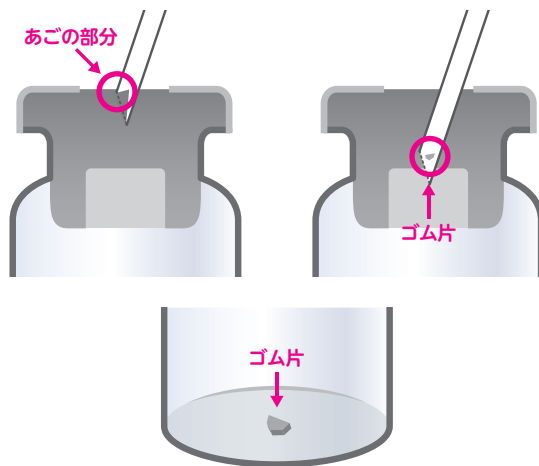

注射針の正しい刺し方

1 注射針をゴム栓の**中央部にゆっくり垂直に刺す。**

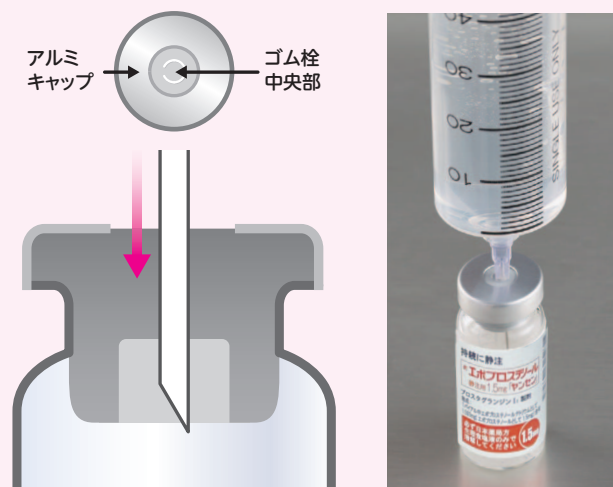

2 注射針を刺している途中で**回さない。**



3 注射針を複数回刺す場合には、**同じ場所を避ける。**

